


レスピマツト 各部位の名称 (薬品名:スピリーバ、スピオルト)

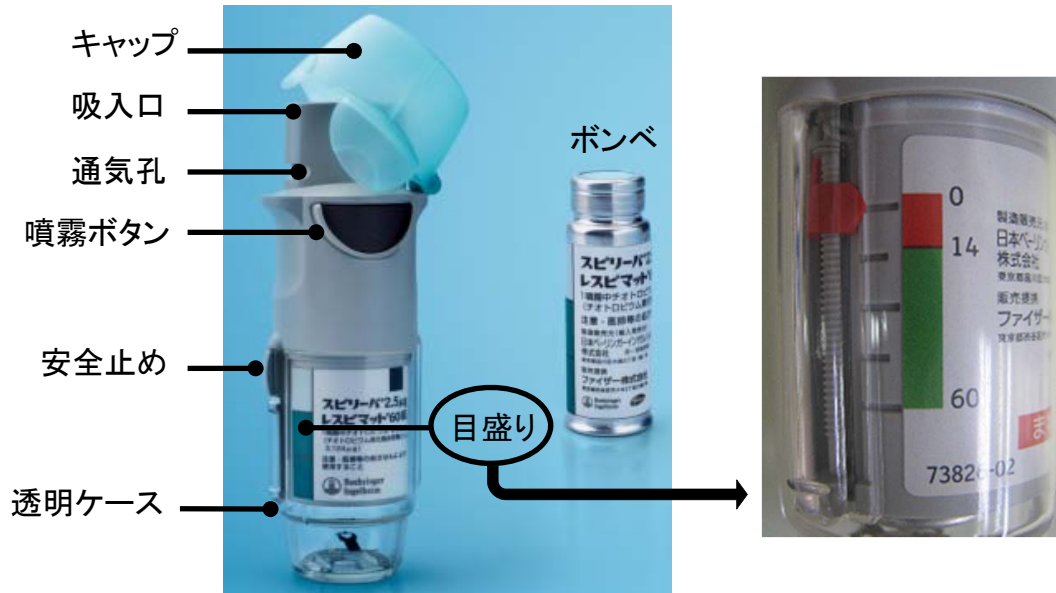

(写真はスピリーバ)

レスピマツトの初回準備方法 (薬品名:スピリーバ、スピオルト)


※ 新しい吸入器はテスト噴霧を4回繰り返して下さい <5回目から吸入可能>

ボンベ装着

- キャップを閉じた状態で、安全止めを押しながら、透明ケースを外します
- ボンベ上部の緑色の部分を器具に挿入します
- ボンベをかたい平面の上でゆっくり押し込んで、カチッと音がするまで挿入します
- 外しておいた透明ケースを装着します

テスト噴霧(4回)

- キャップを閉じた状態で上向きにしてもち、透明ケースを青い矢印の方向にカチッと音がするまで180度回転させます (A)
- キャップを完全に開けます (B)
- 吸入口を下に向け噴霧ボタンを押し、ミスト(霧)が見えるのを確認します(薬が目に入らないように注意)
- キャップを閉じます

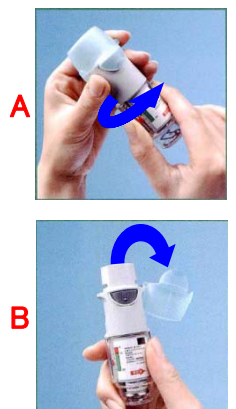

レスピマツトの吸入手順 (薬品名:スピリーバ、スピオルト)

- ※ 残量が少ない時は早めに新しいものを処方してもらって下さい
- ※ 初回準備方法(ボンベ装着・テスト噴霧)は1枚目(1/2)を参照

