


ジェヌエア 各部位の名称 (薬品名:エクリラ)

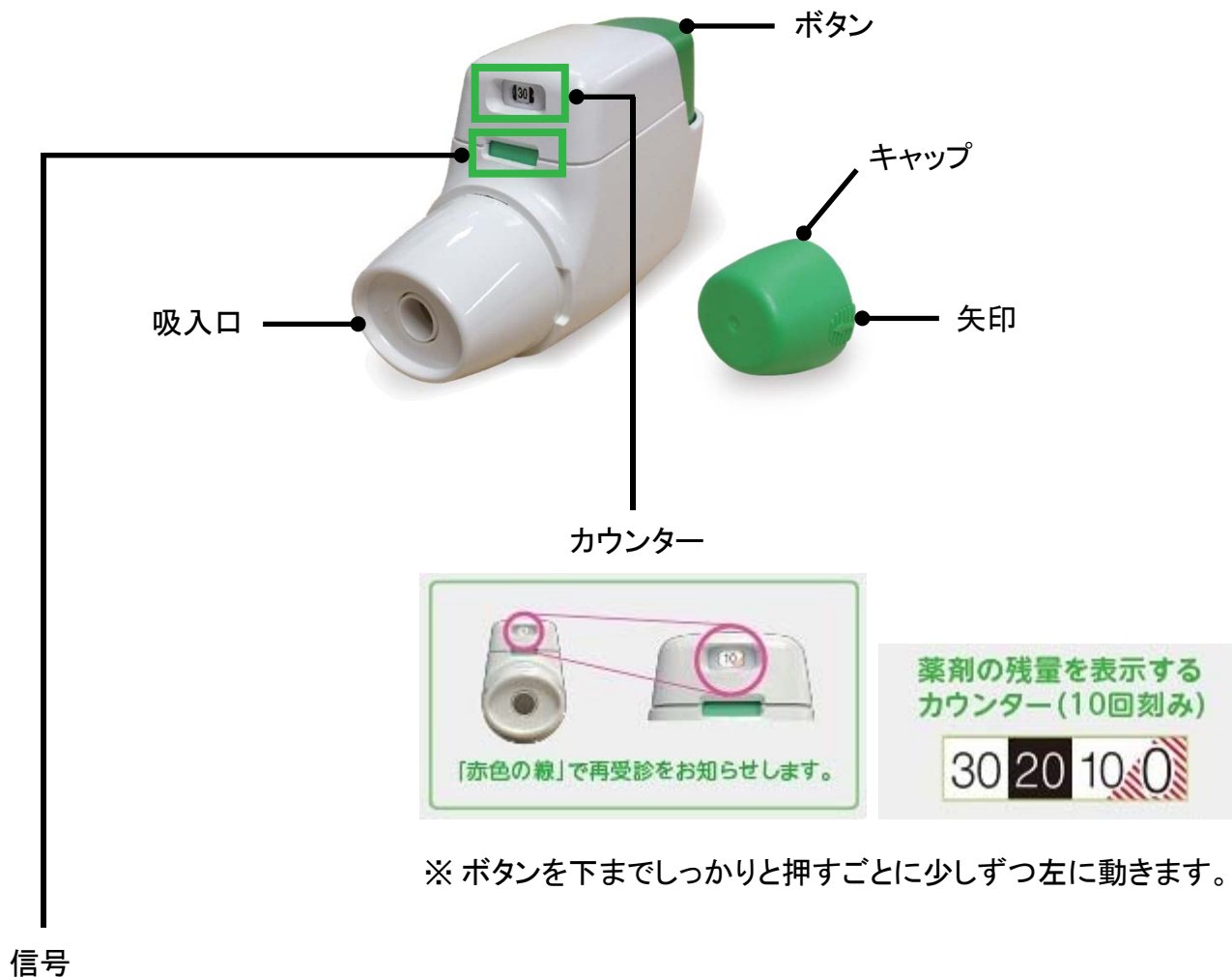

- ※ ボタンを押すと、1回分の薬がセットされ、信号が赤色から緑色に変わります。
- ※ 正しく吸入できると、カチッという音が出て、信号が緑色から赤色へ戻ります。
- ※ 吸入しないときは薬剤をセットしないで下さい。

ジェヌエアの吸入手順 (薬品名:エクリラ)

- ※ 残量が少ない時は早めに新しいものを処方してもらって下さい
- ※ 操作はカウンターを上にして行って下さい


① 薬の準備

- カウンターで残量を確認します
- キャップ両側の矢印部分を軽く押して引っ張り、外します (A)
- ボタンを下までしっかりと押して離します
(薬がセットされ、信号が赤色から緑色に変わります) (B)



② 息吐き

- 無理をしない程度に十分に息を吐き出します
(吸入口には息を吹きかけないで下さい)

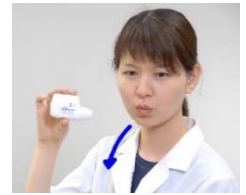

③ 吸入

- 吸入口をくわえ、深く息を吸い込みます
(正しく吸入できると、カチッと音がして、信号が緑色から赤色へ戻ります。カチッと音がしても最後まで息を吸いきって下さい)



④ 息止め

- 吸入口から口を離し、5秒間息を止めます



⑤ 息吐き

- 息をゆっくり吐き出します
(吸入口には息を吹きかけないで下さい)



⑥ 後片付け

- 使用後はキャップをします



⑦ うがい

- 吸入後は、必ずうがい(ガラガラ・ブクブク)を各3回します

